



momo tricycle.




schuchmann®





**„Avec mon momo tricycle.
je peux tout faire.“**

Sophia, qui aime son tricycle par-dessus tout.



4 Tricycles & accessoires.



momo tricycle.
06-09



follow-me momo.
10-13



momo motion.
14-17



momo accessoires.
18-21



Bon à savoir : Le tricycle – une aide à la thérapie.
22



Couleurs RAL disponibles.
23

Table des matières.



**Cher partenaires, parents et enfants,
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter
notre nouvelle brochure du momo tricycle - les
tricycle thérapeutique.**

Il résulte de nombreuses années de conceptions, d'innovations et d'évolutions pour l'aide d'enfants, adolescents et adultes. Nos tricycles allient différents objectifs et exigences thérapeutiques et médicales et peuvent être spécifiquement adaptés aux besoins de chacun à travers sa large gamme d'accessoires.

Le momo motion. est notre tout dernier modèle, dont le modèle de base est déjà équipé d'un moteur électrique. Il apporte son soutien là où la force de l'utilisateur n'est pas tout à fait suffisante.

Vos commentaires et suggestions sont prioritaires à nos yeux. Nous sommes toujours à votre écoute. Pour plus d'information sur les accessoires et les prix, visitez notre site www.schuchmann.fr et n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, présentations ou essais.

Nous serons heureux de vous présenter personnellement tous les avantages de notre tricycle.

Nous sommes là pour vous!
Votre équipe **schuchmann**



GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



30-98,5 cm

16-23 cm

Je suis ton tricycle très cool. Je suis vite prêt si tu as envie de faire un tour du quartier ou du lac. Non seulement c'est chouette, mais en plus on entraîne et on fait bouger tes articulations, ta musculature et ton système cardio-vasculaire. Tu peux m'avoir avec différentes selles, guidons et couleurs. Ton âge n'a aucune importance car j'existe en différentes tailles : pour enfants, adolescents et adultes.





momo tricycle.



Soutien
pour la verticalisation
du haut du corps.

Selle
disponible en différentes
formes et tailles.

Guidon
beaucoup de
versions différentes.

**Guidage de chaîne
haut de gamme**
extrêmement
silencieux.

Géométrie optimisée
transfert facile, bonne
position assise et
grande maniabilité.

Propulsion individuelle
grand choix avec pignon
fixe, roues libres, assistances
électriques.

Hauteur de garde au sol basse de série
montée à vélo aisée et
transfert autonome.

Cadre
en aluminium léger et
très résistant.

Gamme d'accessoires diversifiée

pour un soutien optimal & un
équipement individuel, à partir de
la page 86.



**Tu as le choix ! Entre un grand nombre de guidons,
selles, pédales, appuis-tête et différentes
propulsions !**



**Couleurs du
cadre 12"**



**Couleurs du
cadre 16" et 20"**



**Couleurs du cadre
24", 26" et 26" (XL)**





Données	12"	16"	20"	24"	26"	26" (XL)
Distance pédale - selle min. et max. *	30 - 38 cm	42 - 57,5 cm	50 - 64,5 cm	56,5 - 73,5 cm	66,5 - 83 cm	74 - 90,5 cm
Distance pédale - selle min. et max. **	33 - 41 cm	45 - 60 cm	52 - 68 cm	58 - 81,5 cm	67,5 - 91 cm	75 - 98,5 cm
Distance tige de selle - potence	33 cm	39 cm	45 cm	52 cm	58 cm	58 cm
Distance axes roues avant et arrière	68 cm	80 cm	91 cm	104 cm	112 cm	112 cm
Hauteur garde au sol	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Longueur globale	102 cm	120 cm	140 cm	165 cm	178 cm	178 cm
Largeur globale	58 cm	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Charge max.	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Poids à vide	12 kg	14,5 kg	17 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T



Plus d'infos sur accessoires & fixations
aux pages 18 à 21 et dans la liste de prix.





Je suis ton attelage tandem futé.

Je m'accroche pour que tu puisses participer à toutes les excursions ! Grâce à moi, ton **momo tricycle** peut se coupler au vélo de tes parents. C'est un jeu d'enfant grâce aux adaptateurs qui fonctionnent sur quasiment tous les types de vélos. Une fois monté, on me fixe en quelques gestes et avec peu d'outils – même spontanément pendant une randonnée, par exemple si tu es fatigué et que la circulation te déroute. Et après une petite pause, hop tu peux te remettre en route !



Une seule préparation à effectuer sur le tricycle.



Je te permets de t'accrocher facilement et en toute sécurité au vélo de tes parents si tu es fatigué, que tu n'as plus la force de continuer ou que la circulation est trop dangereuse.



follow-me momo.



Léger

pour un transport facile et durable sur le vélo adulte.

Différents adaptateurs

permettent le montage sur des vélos avec roues à attache rapide ou écrous.

Traverse

adaptable à tous les vélos pour adultes 26" et 28".

Plaque de serrage

très facilement adaptable à une taille de tricycle.

Étrier principal

sécurisation de l'accueil de l'axe et de la hauteur de transport

Rotule

pour plus de sécurité. Il permet au tricycle et au vélo des parents de se pencher indépendamment.





Données	T. 1	T. 2	T. 3
Taille requise du vélo tracteur	26" - 28"	26" - 28"	26" - 28"
Taille de tricycle max.	12" (à utiliser aussi pour 16" + 20")	16" + 20"	24" + 26"
Poids de traction max	40 kg	60 kg	80 kg
Poids	5,1 kg	5,1 kg	8,7 kg

GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



42-98,5 cm

18-23 cm

Je suis ton tricycle avec assistance électrique qui a fait ses preuves.

Je t'assiste quand ta force n'est pas tout à fait suffisante. Que ce soit pour de courts ou de longs trajets en ville ou à la campagne. Etant donné que je dispose d'une transmission directe silencieuse, tu peux profiter de ton excursion sans être perturbé par le bruit. De plus, mon aide au démarrage en option t'assiste pour un démarrage à pleine vitesse. Pour les conducteurs expérimentés, mon assistance est également disponible en « version Confirmé ». Celle-ci offre un moteur plus puissant. Sur ma « version Débutant », le mode Eco, Standard ou Power peut être également réglé sur l'écran.







L'assistance électrique DirectPower E-Bike

est conçue sans balai et sans engrenage, minimise les frais d'entretien et l'usure ; de plus, il n'y a pas de bruits de moteur.



La commande par bouton ou poignée rotative

te permet, également pendant le trajet, de régler le mode et, le cas échéant, l'aide au démarrage.




L'écran LCD

affiche des indications sur le niveau d'assistance, la vitesse et l'état de la batterie. Facile à lire même dans un environnement clair/ensoleillé.

Couleurs du cadre 16" & 20"



Couleurs du cadre 24", 26" & 26" XL

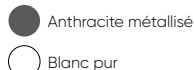



**Quelle que soit la destination, tu peux toujours compter sur moi.
L'union fait la force !**



La batterie peut être également retirée pour être rechargée. L'état de charge peut être lu à l'écran.



Données	16"	20"	24"	26"	26" (XL)
Pédale jusqu'au bord supérieur selle*	42 - 57,5 cm	50 - 64,5 cm	56,5 - 73,5 cm	66,5 - 83 cm	74 - 90,5 cm
Pédale jusqu'au bord supérieur selle**	45 - 60 cm	52 - 68 cm	58 - 81,5 cm	67,5 - 91 cm	75 - 98,5 cm
Tube de la tige de selle jusqu'au tube de la potence	39 cm	45 cm	52 cm	58 cm	58 cm
Empattement	80 cm	91 cm	104 cm	112 cm	112 cm
Hauteur d'enjambement	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Longueur globale	120 cm	140 cm	165 cm	178 cm	178 cm
Largeur globale	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Charge max.	60 kg	80 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Poids	24,5 kg	27 kg	29,5 kg	31,5 kg	31,7 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T



Plus d'infos sur accessoires & fixations
aux pages 18 à 21 et dans la liste de prix.



Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d'accueil.




momo accessoires.

Diversité.



**Guidon circulaire
avec poignée de frein**

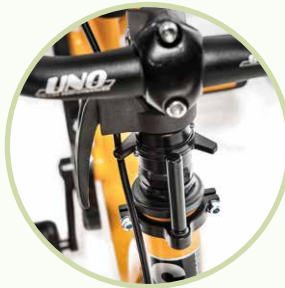

**Limiteur d'angle
de braquage**



Rallonge de potence



Selle standard



Selle gel



Selle anatomique



Selle banane



Selle Mofa

	Données	T. 1	T. 2.	T. 3
Selle standard	Largeur	15 cm	15 cm	18 cm
	Longueur	21 cm	24 cm	26 cm
Selle gel	Largeur arrière	19 cm	24 cm	-
	Largeur avant	4 cm	7 cm	-
	Longueur	24 cm	27 cm	-
Selle anatomique	Largeur arrière	20,5 cm	24 cm	-
	Largeur avant	4 cm	4 cm	-
	Longueur arrière	9,5 cm	9,5 cm	-
	Longueur totale	14,5 cm	14,5 cm	-

	Données	T. 1
Selle banane	Largeur arrière	11 cm
	Largeur au centre	6 cm
	Largeur avant	8 cm
	Longueur	25 cm
Selle Mofa	Largeur arrière	26 cm
	Largeur avant	9,5 cm
	Longueur arrière	12 cm
	Longueur totale	25 cm



**Raccourcisseurs de
manivelle réglables en
continu**



**Raccourcisseur de
manivelle**



**Manivelle spéciale
contracture du genou**



	T. 1	T. 2.	T. 3
Tige de selle standard	pour 12"	pour 16"	pour 20" - 26"
Tige de selle en T	pour 12"	pour 16" + 20"	pour 24" + 26"



Cintre
en quatre tailles



avec fixation adaptée



Données	T. 1	T. 2.	T. 3	T. 4
Hauteur max.*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Profondeur	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

*mesuré de Selle standard à Bord supérieur de la pelote respective



Guidon Classic



Guidon Touring



Guidon circulaire



Guidon multi-réglable

	Données	T. 1	T. 2.	T. 3	T. 4
Guidon Classic	Largeur	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
Guidon Touring	Largeur	55 cm	58 cm	-	-
	Profondeur	17 cm	17 cm	-	-
Guidon circulaire	Largeur	40 cm	43 cm	48 cm	-
	Profondeur	17 cm	21 cm	25 cm	-
Guidon multi-réglable	Largeur	61,5 cm	-	-	-
	Profondeur	16,5 cm	-	-	-





**Pédale avec
cale-pied**



Pédale home-trainer



Support de pieds



**Support de pieds
avec guide de jambe**



**Support de pieds
avec guide de
jambe dynamique**

**Pelotes dorsales et pelviennes
dynamiques et réglables en largeur**



	Données	T. 1	T. 2.	T. 3
Pelote dorsale dynamique				
Pelote pelvienne dynamique	Largeur	20 - 30 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
Pelote pelvienne réglable en largeur				
Pelote pelvienne réglable en largeur	Largeur	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm

Gant de maintien



Ceinture 2 points



Harnais



	Données	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3
Gant de maintien	Largeur avant	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Ceinture 2 points	Largeur	-	5 cm	6,5 cm	7 cm
	Longueur	-	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
Harnais	Largeur intérieure	-	8 cm	9 cm	12 cm
	Largeur totale	-	25 cm	30 cm	34 cm
	Hauteur côté	-	10 cm	12 cm	16 cm
	Hauteur totale	-	28 cm	30 cm	35 cm



Barre de poussée



Système de contrôle directionnel pour accompagnateur



Definition – tricycle thérapeutique.

- Un besoin accru de stabilité

Raisons d'une assistance.

- Régulation du tonus musculaire
- Réduction des conséquences du manque de mouvement
- Entraînement musculaire
- Influence positive sur les mauvaises postures
- Entraînement de l'équilibre

Types de maladies.

- Toutes les formes d'IMC
- Hypertonie spastique (unilatérale et bilatérale)
- Dyskinésie
- Ataxie
- Spina bifida
- Dystrophie musculaires
- Amyotrophie spinale
- Paralyse du système nerveux périphérique

Objectifs (selon l'ICF).

Objectifs fonctionnels

- Fortification musculaire et régulation du tonus
- Compensation de fonctions corporelles inexistantes ou limitées
- Influence positive sur la structure physique
- Stabilité et contrôle de la posture
- Amélioration des fonctions vitales
- Amélioration de la forme physique, du tonus et des qualités de coordination
- Stimulation du développement mental

Objectifs d'activité

- Stimulation des qualités de coordination et du dynamisme physique
- Amélioration de la mobilité
- Encouragement à l'activité
- Initiation au plaisir de bouger
- Amélioration de l'indépendance, de l'autonomie et de la responsabilité personnelle
- Encouragement à la marche

- Renforcement du bien-être psychique et physique
- Compensation d'un handicap
- Augmentation de l'autonomie
- Mise en application efficace de thérapies physiques

- Dismélie
- Hypotonie musculaire
- Maladie de Parkinson
- Sclérose en plaques
- Paraplégie
- Traumatisme crânio-cérébral
- AVC

Objectifs de participation

- Augmentation de la qualité de vie
- Interaction et communication sociales
- Intégration parmi les enfants du même âge
- Développement de la personnalité
- Fortification et acquisition de compétences dans le cadre des possibilités individuelles



Couleurs RAL disponibles.

Couleurs RAL disponibles sans supplément pour le **momo tricycle**.

RAL 1000 Orange Orange RAL 1000	RAL 1001 Rouge Rouge RAL 1001	RAL 1002 Rouge Rouge RAL 1002	RAL 1003 Rouge Rouge RAL 1003	RAL 1004 Rouge Rouge RAL 1004	RAL 1028 Rouge Rouge RAL 1028	RAL 1032 Rouge Rouge RAL 1032	RAL 1033 Rouge Rouge RAL 1033	RAL 1034 Rouge Rouge RAL 1034	RAL 1035 Rouge Rouge RAL 1035	RAL 3003 Rouge Rouge RAL 3003	RAL 3004 Rouge Rouge RAL 3004	RAL 3005 Rouge Rouge RAL 3005	RAL 3009 Rouge Rouge RAL 3009	RAL 3011 Rouge Rouge RAL 3011
RAL 1005 Rouge Rouge RAL 1005	RAL 1006 Rouge Rouge RAL 1006	RAL 1007 Rouge Rouge RAL 1007	RAL 1011 Rouge Rouge RAL 1011	RAL 1013 Rouge Rouge RAL 1013	RAL 1036 Rouge Rouge RAL 1036	RAL 1037 Rouge Rouge RAL 1037	RAL 2000 Rouge Rouge RAL 2000	RAL 2001 Rouge Rouge RAL 2001	RAL 2002 Rouge Rouge RAL 2002	RAL 3012 Rouge Rouge RAL 3012	RAL 3013 Rouge Rouge RAL 3013	RAL 3014 Rouge Rouge RAL 3014	RAL 3016 Rouge Rouge RAL 3016	RAL 3020 Rouge Rouge RAL 3020
RAL 1014 Rouge Rouge RAL 1014	RAL 1015 Rouge Rouge RAL 1015	RAL 1016 Rouge Rouge RAL 1016	RAL 1017 Rouge Rouge RAL 1017	RAL 1018 Rouge Rouge RAL 1018	RAL 2003 Rouge Rouge RAL 2003	RAL 2004 Rouge Rouge RAL 2004	RAL 2008 Rouge Rouge RAL 2008	RAL 2009 Rouge Rouge RAL 2009	RAL 2010 Rouge Rouge RAL 2010	RAL 3031 Rouge Rouge RAL 3031	RAL 3032 Rouge Rouge RAL 3032	RAL 4002 Rouge Rouge RAL 4002	RAL 4003 Rouge Rouge RAL 4003	RAL 4004 Rouge Rouge RAL 4004
RAL 1019 Rouge Rouge RAL 1019	RAL 1020 Rouge Rouge RAL 1020	RAL 1021 Rouge Rouge RAL 1021	RAL 1023 Rouge Rouge RAL 1023	RAL 1024 Rouge Rouge RAL 1024	RAL 2011 Rouge Rouge RAL 2011	RAL 2012 Rouge Rouge RAL 2012	RAL 3000 Rouge Rouge RAL 3000	RAL 3001 Rouge Rouge RAL 3001	RAL 3002 Rouge Rouge RAL 3002	RAL 4005 Rouge Rouge RAL 4005	RAL 4006 Rouge Rouge RAL 4006	RAL 4007 Rouge Rouge RAL 4007	RAL 4009 Rouge Rouge RAL 4009	RAL 4010 Rouge Rouge RAL 4010
RAL 5000 Rouge Rouge RAL 5000	RAL 5001 Rouge Rouge RAL 5001	RAL 5002 Rouge Rouge RAL 5002	RAL 5003 Rouge Rouge RAL 5003	RAL 5004 Rouge Rouge RAL 5004	RAL 5007 Rouge Rouge RAL 5007	RAL 5004 Rouge Rouge RAL 5004	RAL 5005 Rouge Rouge RAL 5005	RAL 5006 Rouge Rouge RAL 5006	RAL 6001 Rouge Rouge RAL 6001	RAL 6002 Rouge Rouge RAL 6002	RAL 6021 Rouge Rouge RAL 6021	RAL 6024 Rouge Rouge RAL 6024	RAL 6025 Rouge Rouge RAL 6025	RAL 6026 Rouge Rouge RAL 6026
RAL 5005 Rouge Rouge RAL 5005	RAL 5007 Rouge Rouge RAL 5007	RAL 5008 Rouge Rouge RAL 5008	RAL 5009 Rouge Rouge RAL 5009	RAL 5010 Rouge Rouge RAL 5010	RAL 6002 Rouge Rouge RAL 6002	RAL 6003 Rouge Rouge RAL 6003	RAL 6004 Rouge Rouge RAL 6004	RAL 6005 Rouge Rouge RAL 6005	RAL 6008 Rouge Rouge RAL 6008	RAL 6027 Rouge Rouge RAL 6027	RAL 6029 Rouge Rouge RAL 6029	RAL 6032 Rouge Rouge RAL 6032	RAL 6033 Rouge Rouge RAL 6033	RAL 6034 Rouge Rouge RAL 6034
RAL 5011 Rouge Rouge RAL 5011	RAL 5012 Rouge Rouge RAL 5012	RAL 5013 Rouge Rouge RAL 5013	RAL 5014 Rouge Rouge RAL 5014	RAL 5015 Rouge Rouge RAL 5015	RAL 6009 Rouge Rouge RAL 6009	RAL 6010 Rouge Rouge RAL 6010	RAL 6011 Rouge Rouge RAL 6011	RAL 6012 Rouge Rouge RAL 6012	RAL 6013 Rouge Rouge RAL 6013	RAL 6036 Rouge Rouge RAL 6036	RAL 7000 Rouge Rouge RAL 7000	RAL 7001 Rouge Rouge RAL 7001	RAL 7004 Rouge Rouge RAL 7004	RAL 7005 Rouge Rouge RAL 7005
RAL 5017 Rouge Rouge RAL 5017	RAL 5018 Rouge Rouge RAL 5018	RAL 5019 Rouge Rouge RAL 5019	RAL 5020 Rouge Rouge RAL 5020	RAL 5021 Rouge Rouge RAL 5021	RAL 6014 Rouge Rouge RAL 6014	RAL 6016 Rouge Rouge RAL 6016	RAL 6017 Rouge Rouge RAL 6017	RAL 6018 Rouge Rouge RAL 6018	RAL 6019 Rouge Rouge RAL 6019	RAL 7006 Rouge Rouge RAL 7006	RAL 7009 Rouge Rouge RAL 7009	RAL 7011 Rouge Rouge RAL 7011	RAL 7012 Rouge Rouge RAL 7012	RAL 7015 Rouge Rouge RAL 7015
RAL 7016 Rouge Rouge RAL 7016	RAL 7021 Rouge Rouge RAL 7021	RAL 7022 Rouge Rouge RAL 7022	RAL 7023 Rouge Rouge RAL 7023	RAL 7024 Rouge Rouge RAL 7024	RAL 7046 Rouge Rouge RAL 7046	RAL 7047 Rouge Rouge RAL 7047	RAL 7048 Rouge Rouge RAL 7048	RAL 8001 Rouge Rouge RAL 8001	RAL 8002 Rouge Rouge RAL 8002	RAL 9005 Rouge Rouge RAL 9005	RAL 9006 Rouge Rouge RAL 9006	RAL 9007 Rouge Rouge RAL 9007	RAL 9010 Rouge Rouge RAL 9010	RAL 9011 Rouge Rouge RAL 9011
RAL 7026 Rouge Rouge RAL 7026	RAL 7030 Rouge Rouge RAL 7030	RAL 7031 Rouge Rouge RAL 7031	RAL 7032 Rouge Rouge RAL 7032	RAL 7033 Rouge Rouge RAL 7033	RAL 8003 Rouge Rouge RAL 8003	RAL 8004 Rouge Rouge RAL 8004	RAL 8007 Rouge Rouge RAL 8007	RAL 8011 Rouge Rouge RAL 8011	RAL 8012 Rouge Rouge RAL 8012	RAL 9016 Rouge Rouge RAL 9016	RAL 9018 Rouge Rouge RAL 9018	RAL 9022 Rouge Rouge RAL 9022	RAL 9023 Rouge Rouge RAL 9023	
RAL 7035 Rouge Rouge RAL 7035	RAL 7036 Rouge Rouge RAL 7036	RAL 7037 Rouge Rouge RAL 7037	RAL 7038 Rouge Rouge RAL 7038	RAL 7039 Rouge Rouge RAL 7039	RAL 8016 Rouge Rouge RAL 8016	RAL 8017 Rouge Rouge RAL 8017	RAL 8019 Rouge Rouge RAL 8019	RAL 8022 Rouge Rouge RAL 8022	RAL 8023 Rouge Rouge RAL 8023					
RAL 7040 Rouge Rouge RAL 7040	RAL 7042 Rouge Rouge RAL 7042	RAL 7043 Rouge Rouge RAL 7043	RAL 7044 Rouge Rouge RAL 7044	RAL 7045 Rouge Rouge RAL 7045	RAL 8029 Rouge Rouge RAL 8029	RAL 9001 Rouge Rouge RAL 9001	RAL 9002 Rouge Rouge RAL 9002	RAL 9003 Rouge Rouge RAL 9003	RAL 9004 Rouge Rouge RAL 9004					

Important : ce nuancier RAL est proposé à titre d'information, les couleurs ou leurs nuances peuvent être légèrement différentes.





schuchmann.fr