

Elle vaut son pesant de confiance.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 120



(-)5°-25°

(-)5°-30°

36-47 cm

48-60 cm


34-44 cm



Je suis ton siège thérapeutique solide.

Je suis l'accompagnateur quotidien des adolescents et adultes. Pour les repas, les devoirs ou la lecture : je veille à ce que tu sois toujours assis de manière optimale. Ma colonne centrale et ma rallonge d'empattement garantissent une stabilité élevée, je suis à la hauteur de fortes sollicitations. Mon assise de forme anatomique assure la position droite du bassin et empêche que tu ne glisses hors de l'assise.



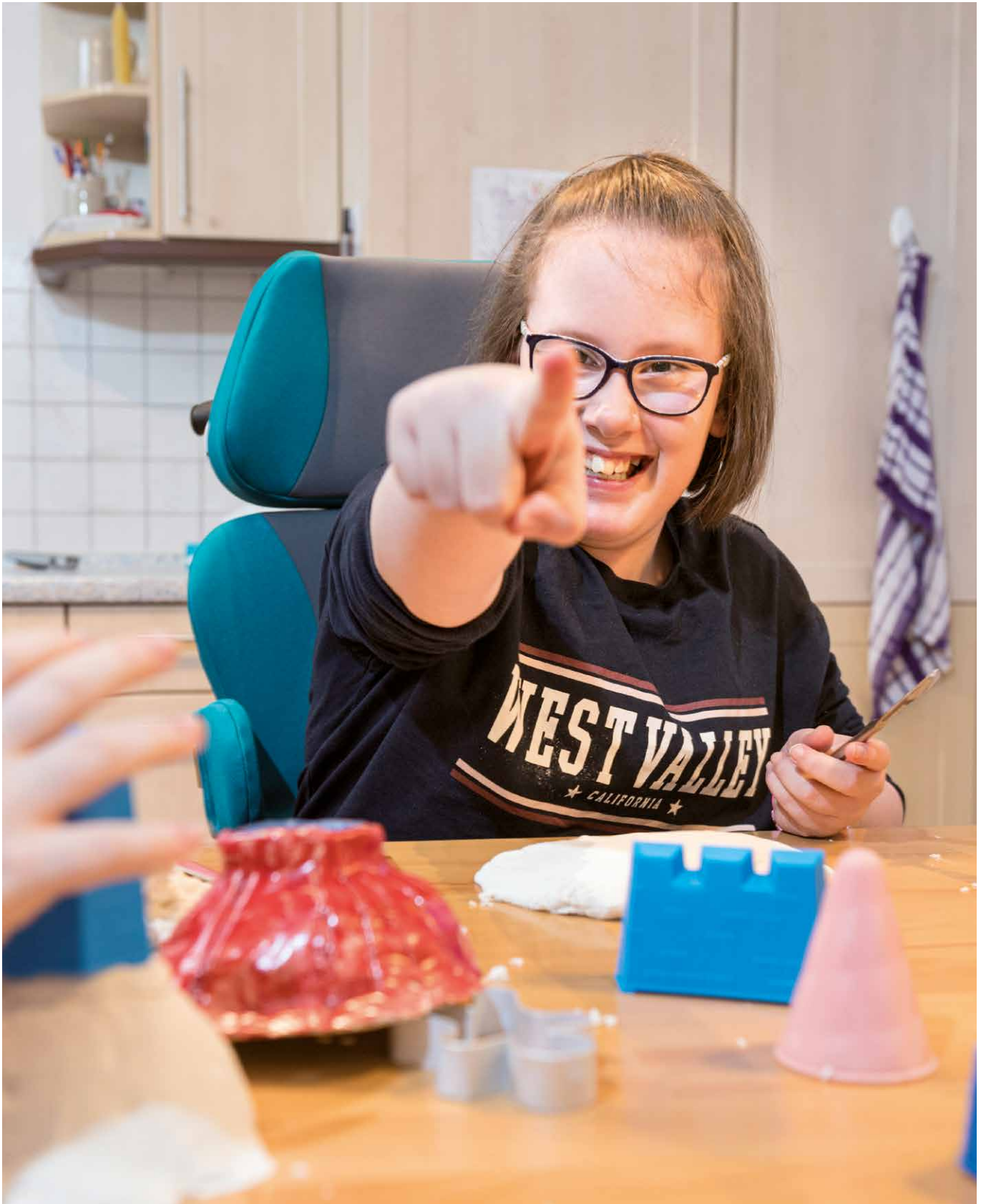

madita maxi.

Poignée de poussée
pour faciliter le transfert.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une position stable et verticale.

Accoudoirs
équipés de surfaces d'appui moelleuses et réglables en largeur, hauteur et inclinaison.

Pédale
pour déclencher le réglage en inclinaison du siège.

Roulettes doubles
facilitent le transfert.

Appui-tête
adaptable en hauteur.

Inclinaison dossier
réglable à l'aide d'un levier de blocage.

Pelotes de bassin
adaptable en hauteur, profondeur et inclinaison.

Châssis
solide et stable.

Simple, pratique, bien :
le repose-pieds amovible te permet de poser tes pieds confortablement mais aussi de faire avancer ton siège avec les pieds, sans le repose-pieds.

Montage facile !

Couleurs du cadre

- Anthracite métallisé
- Télégris 4 (blanc-gris)



Données	madita maxi.
Profondeur assise	36 - 47 cm
Largeur assise	34 - 44 cm
Hauteur dossier court (en tôle d'aluminum 3 mm / 4 mm)	40 cm / 48 cm
Hauteur dossier long (en tôle d'aluminum 3 mm / 4 mm)	48 cm / 56 cm
Hauteur assise	48 - 60 cm
Longueur mollet	37 - 49 cm
Largeur totale	64 cm
Longueur châssis de base	80 cm
Inclinaison assise	(-)5° - 30°
Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
Charge max.	120 kg
Poids	26 kg

**Être bien assis, c'est facile :
ton bassin est soutenu de manière
optimale grâce à la surface de forme
anatomique du siège et du dossier.**

**Surface du siège et
du dossier de forme
anatomique.**



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.

